



Soft DBO Logic v1.00

Manual de Instrucciones

Contenido

- I) Instalación y requerimientos de hardware**
- II) Conectar el equipo a la PC**
- III) Descripción de la pantalla**
- IV) Configuración general del instrumento**
- V) Configurar los datos de la empresa**
- VI) Selección de la/las muestras.**
- VII) Configuración individual (selección de escala individual)**
- VIII) Medición de la DBO**
 - VIII.1) Inicio de la medición.
 - VIII.2) Interrupción de la medición.

I) Instalación y requerimientos de hardware:

El Soft DBO Logic v1.00 requiere para su funcionamiento del siguiente hardware:

Equipo manométrico DBO Logic.

PC Pentium o superior, equipada con Windows 32 bits (2000/XP/Vista).

- 1) Coloque el CD provisto con el equipo y siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla. (Si el el programa de instalación no se inicia automaticamente, haga doble click en el archivo **Setup.exe** que se encuentra ubicado en directorio raíz de la unidad del del CD provisto).
- 2) Para **inicial el programa** haga doble click en el ícono del mismo.

II) Conectar el equipo a la PC:

- 1) Conecte el cable (USB o RS-232) al equipo y a la PC.

Si utiliza conexión USB:

- 1) Cuando aparezca la solicitud del driver, seleccione la ubicación del mismo en la carpeta Drivers-USB del CD provisto.
- 2) Repita el paso 1 nuevamente ante la nueva solicitud del Windows
- 3) Una vez iniciado el programa, seleccione en el menu: **Configuración** y luego **Configurar puerto...**

Aparecerá un cuadro de dialogo en el cual puede elegir **Puerto**: COM1 a COM4 o USB, y **Velocidad**: 19200 bauds.



Fig.1

- 4) Seleccione en el menu: **Configuración** y luego **Conectar...**, o puede utilizar el método abreviado de teclas: Ctrl+C.
(Siempre el equipo DBO Logic para estar conectado se debe encontrar en el menu de pantalla, es decir, fuera del menu de Configuración: MENU - SETUP).

III) Descripción de la pantalla:

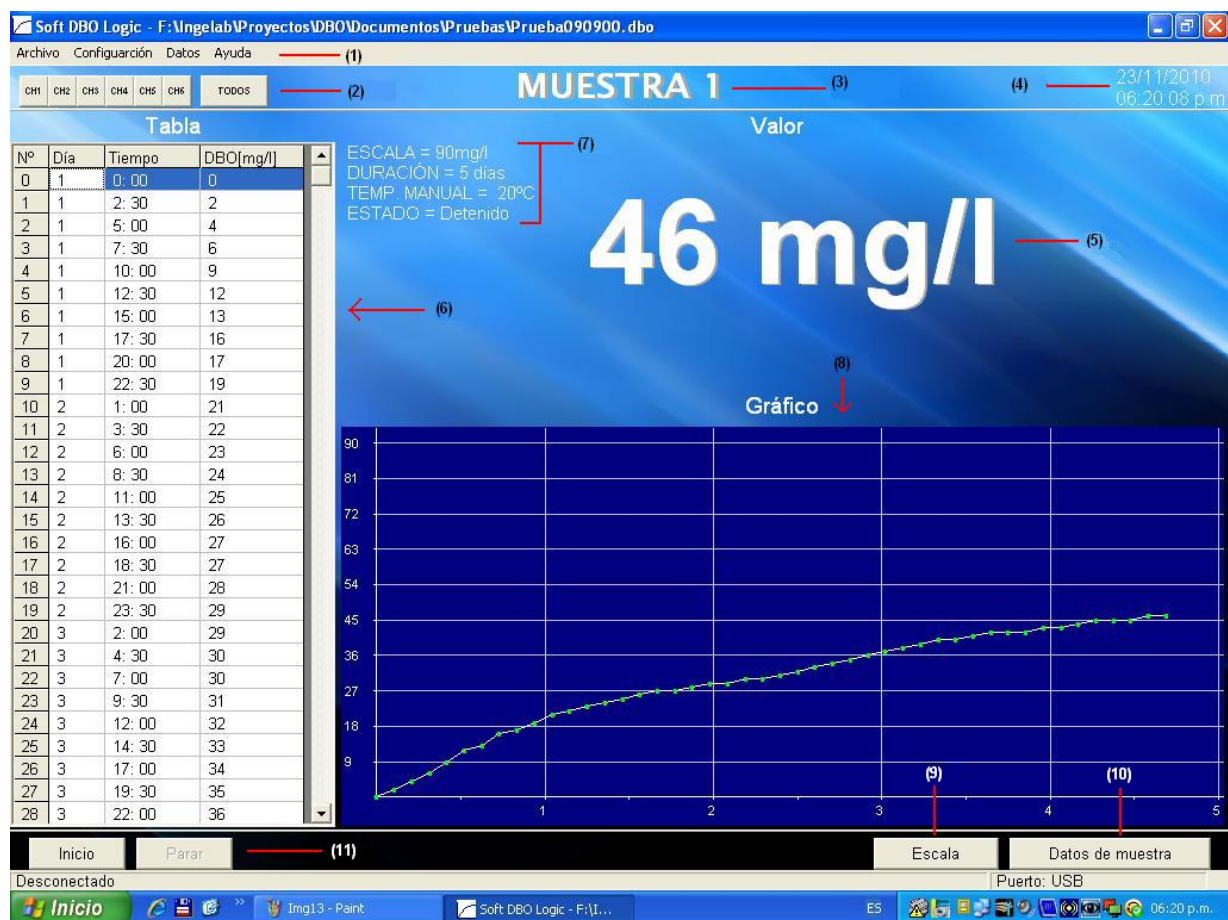


Fig. 2

- | | |
|---|---|
| (1) Menu. | (7) Configuración y estado actual de la muestra. |
| (2) Botones de selección de canal | (8) .Datos registrados en la medición presentados en forma gráfica |
| (3) Indica muestra actual seleccionada | (9) Botón de selección de escala para la muestra actual. |
| (4) Fecha y hora. | (10) Boton para agregar datos relativos a la muestra actual. |
| (5) Último valor registrado en la medición. | (11) Botones de Inicio y Parar la medición en la muestra actual |
| (6) Datos registrados en la medición presentados en forma tabular | |

IV) Configuración general de la medición: Se pueden configurar en forma general los siguientes parámetros:

Escala general: Se puede seleccionar en forma general (para todas las muestras), las siguientes escalas:

090 mg/l ; 0 ...250 mg/l ; 0 ...600 mg/l ; 0....1000 mg/l. La escala seleccionada se utilizará en todas las muestras, salvo que se especifique otra en alguna muestra en particular.

Duración de DBO: Se puede seleccionar la duración del ensayo en:

- 5 días: método estándar.
- un número de días arbitrario: el usuario selecciona el mismo.
- en forma continua: la medición durará hasta que el usuario la detenga, recolectando los valores en espacios de tiempo ajustados automáticamente según la duración final de la medición.

Temperatura: Se puede ingresar la temperatura de la medición (correspondiente a la de incubación) en forma manual o se puede seleccionar la medición automática de la misma (el instrumento sensa la del ambiente de incubación, incluyendo las variaciones, compensando en el cálculo de la DBO).

Retardo: Se puede programar un retardo en minutos previo al inicio de la medición, para compensar el tiempo de estabilización en temperatura del sistema (equipo + incubadora).

- 1) Seleccione en el menú: **Configuración**, y luego seleccione **Configurar la medición...**



Fig. 3

V) Configurar los datos de la empresa :

(Estos datos serán utilizados para exportar los resultados a Excel o Word)

- 1) Seleccione en el menu: **Datos**, y luego seleccione **Datos de la Empresa...**

Datos de la Empresa

Empresa:
INGELAB

Dirección:
Perrando 862

Localidad: Longchamps, Almirante Brown **CP:** B1854A **Provincia:** Buenos Aires

Tel: 011 4233 9408 **Fax:** 011 4233 9408

Dependencia:
Laboratorio

Jefe de Laboratorio

Nombre: **Apellido:**

Tel.: **Int.:**

E-Mail:

Aceptar Cancelar

Fig. 4

VI) Selección de la/las muestras:

Se pueden visualizar las muestras seleccionando en la pantalla como se indica en la figura 5:

Soft DBO Logic - C:\VEN F\Proyectos\DBO\Documentos\Pruebas\DatosMatilde.dbo

Archivo Configuración Datos Ayuda

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 TODOS

MUESTRA 2

Selección de muestra a visualizar

Valo

Tabla

Nº	Día	Tiempo	DBO[mg/l]
20	3	2: 00	25
21	3	4: 30	26
22	3	7: 00	26

ESCALA = 90mg/l
DURACIÓN = 5 días
TEMP. MANUAL = 20°C
ESTADO = Detenido

Fig. 5

VII) Configuración individual:

Se puede configurar en forma individual la escala de cada canal, con el boton que se indica en la figura 6:



Fig. 6

VIII) Medición:

VIII.1) Inicio de la medición:

Puede iniciar la medición de una muestra en particular o de todas las muestras en conjunto.

- 1) Seleccionar la muestra individual o todas las muestras en conjunto, según el procedimiento indicado en Selección de muestras (apartado VI).
- 2) Presione el botón **Inicio**.

VIII.2) Interrupción de la medición:

- 1) Seleccionar la muestra individual o todas las muestras en conjunto, según el procedimiento indicado en Selección de muestras (apartado VI).
- 2) Presione el botón **Parar**.
- 3) Aparece un mensaje de advertencia, para asegurar la intención de detener la prueba. Puede optar por CANCELAR, regresando sin detener la medición, o ACEPTAR para detener la medición.